



04/2024
 SPLUSP191S00
 Debido a la constante actualización tecnológica de nuestros productos, las características técnicas indicadas pueden ser objeto de modificación sin previo aviso. Según las normativas vigentes, en las áreas no comunitarias algunos productos o características pueden presentar disponibilidades y peculiaridades distintas. Te invitamos a contactar con el distribuidor local.

Datos técnicos	SW-17 PLUS	SW-22 PLUS	SW-28 PLUS
Tensión de alimentación	220/240V 50Hz 220/230V 60Hz		
Potencia nominal	2300 W		
Dimensiones externas A x H x P	480 x 500 x 600 mm		
Dimensiones Cámara D x P	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Peso total	51 kg	52 kg	53 kg
Capacidad depósito	4,5 litros		
Autonomía (con nivel máx. de agua)	De 7 a 11 ciclos	De 6 a 10 ciclos	De 5 a 9 ciclos

CICLO	Tipo de ciclo	Tiempo de esterilización [min.]	SW-17 PLUS	SW-22 PLUS	SW-28 PLUS	Secado *
Tiempos ciclo incluyendo el tiempo de esterilización y excluyendo el tiempo de secado [min.]						
134 °C UNIVERSAL	B	4	32	36	41	13-17
121 °C UNIVERSAL	B	20	45	49	54	13-17
134°C VELOCE	S	4	20	23	26	1
134°C SÓLIDOS ENVASADOS	S	4	18	20	24	13-17
134°C PRIÓN	B	18	46	50	55	13-17
XXX °C CUSTOM	S	Ciclo personalizable por el usuario con temperaturas 134 °C / 121 °C, tiempos de proceso a partir de 4' (134 °C) o 20' (121 °C) y secado programable.				
TEST DE VACÍO		TEST	18	18	19	x
HELIX/B&D TEST		TEST	20	24	28	x
VACUUM + HELIX/B&D TEST [ejecutados en secuencia]		TEST	42	46	51	x

* El secado varía en función del modelo y del volumen de la máquina
 Nota: los tiempos no consideran el intervalo de precalentamiento máx. (10 min.).
 Nota: el tiempo puede variar en función de la carga y de la alimentación eléctrica.
 Nota: el tiempo referido a los modelos de 120 V puede sufrir incrementos de hasta un máximo del 20%



SW-PLUS

TECNOLOGÍA AVANZADA



Making Your Life Better.

BU Medical Equipment
Sede Legale ed Amministrativa / Headquarters
 CEFLA s.c.
 Via Selice Provinciale, 23/a
 40026 Imola (BO) - Italy
 t. +39 0542 653111
 f. +39 0542 653344
 sternweber@sternweber.com
 sternweber.com

Stabilimento / Plant
 Via Bicocca, 14/C
 40026 Imola (BO) - Italy
 t. +39 0542 653441
 f. +39 0542 653601



STERNWEBER.COM



Cómo funciona

A diferencia de los autoclaves tradicionales, SW Plus no requiere una conexión hídrica externa para el tratamiento del agua corriente. El usuario puede llenar el depósito principal simplemente con agua de grifo, gracias al filtro desmineralizador allí ubicado. Esto permite racionalizar ampliamente los espacios, simplificar los procesos y obtener un ahorro notable. El sistema de filtrado de SW Plus asegura una simplicidad de procedimiento sin precedentes.


Eficiencia y ahorro

Nunca antes una esterilizadora había ofrecido prestaciones tan elevadas con costes de uso tan bajos. Gracias al filtro de SW Plus que se encarga de desmineralizar el agua, el usuario no tendrá que abastecerse de agua desmineralizada, será suficiente llenar el depósito de la máquina con agua de grifo. El almacenamiento de los bidones y el deterioro de las piezas internas de las máquinas provocado por la mala calidad del agua, a partir de hoy solo serán un recuerdo.



Display LCD

SW Plus es la esterilizadora inteligente y una herramienta de trabajo indispensable que garantiza excelentes prestaciones, entre otras cosas, gracias al display LCD táctil a color con interfaz de usuario sencilla e intuitiva. Los distintos datos de control están representados por íconos que permiten comprender de inmediato el estado de la máquina.

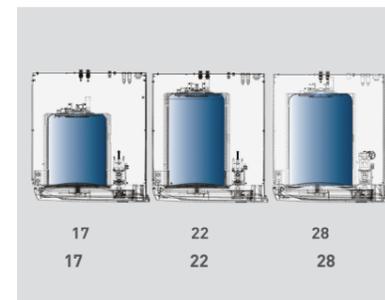

Tres capacidades, un solo tamaño

La línea SW Plus está disponible con 17, 22 y 28 litros de capacidad. Tres capacidades diferentes para que el usuario pueda escoger la máquina que más se adapta a sus necesidades. Las medidas externas, que son idénticas en las tres máquinas, ofrecen facilidad de instalación. Los modelos de 17 y 22 litros cuentan con cinco bandejas, mientras que la versión de 28 litros tiene seis.



Software DataSter para descargar datos automáticamente

DataSter viene incluido de fábrica con la máquina y permite descargar automáticamente los informes de los ciclos directamente a una carpeta en red o del PC. Al finalizar el ciclo, el autoclave envía un archivo en formato PDF a la carpeta seleccionada.



Di.V.A.

Digital Virtual Assistant, este es el significado de la sigla Di.V.A. El primer sistema de control y trazabilidad para dispositivos de esterilización en el Cloud. Los datos guardados estarán a disposición de los operadores al acceder a la página web a ello dedicada.



Aviso de pruebas

Al programar esta función desde el display, SW Plus indicará al operador cuando es necesario efectuar las pruebas Vacuum, Helix o Bowie & Dick. Por consiguiente, ya no será posible olvidar estas importantes operaciones.



Software de trazabilidad

MyTrace es el software de trazabilidad para SW Plus. Gracias a este programa se puede asociar el set de instrumentos esterilizados con el paciente con un código de barras. Una herramienta irremplazable para completar el proceso de esterilización y asegurar protección legal al odontólogo.



Asistencia técnica remota con Easy Check

Todos los autoclaves de la línea SW Plus están equipados con WiFi integrado y puerto Ethernet. Conectándolos a Internet y activando el servicio Easy Check, pueden recibir asistencia remota. Se reduce drásticamente el tiempo de asistencia, con lo que el técnico puede mantener la eficiencia de las máquinas de forma constante.



USB

Los informes de los ciclos quedan automáticamente guardados en la memoria del autoclave y, sucesivamente, se pueden descargar a través del puerto USB ubicado al frente. Los archivos en formato PDF se pueden ver en cualquier dispositivo.



Impresora

Para completar la línea SW Plus, se encuentra disponible como accesorio opcional una impresora externa capaz de imprimir informes o etiquetas con códigos de barras.