



SSWSP191S00
03/2023
Debido a la constante actualización tecnológica de nuestros productos, las características técnicas indicadas pueden ser objeto de modificación sin previo aviso.
Según las normativas vigentes, en las áreas no comunitarias algunos productos o características pueden presentar disponibilidades y peculiaridades distintas. Te invitamos a contactar con el distribuidor local.

Datos técnicos	SW-17	SW-22	SW-28
Tensión de alimentación	220/240V 50Hz 220/230V 60Hz		
Potencia nominal	2300 W		
Dimensiones externas A x H x P	480 x 500 x 600 mm		
Dimensiones Cámara D x P	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Peso total	50 kg	51 kg	52 kg
Capacidad depósito	4,5 litros		
Autonomía (con nivel máx. de agua)	De 7 a 11 ciclos	De 6 a 10 ciclos	De 5 a 9 ciclos

CICLO	Tipo de ciclo	Tiempo de esterilización	SW-17	SW-22	SW-28	Secado *
		(min.)	Tiempos ciclo incluyendo el tiempo de esterilización y excluyendo el tiempo de secado (min.)			
134 °C UNIVERSAL	B	4	29	31	39	13-17
121 °C UNIVERSAL	B	20	45	48	52	13-17
134°C VELOCE	S	4	21	24	27	1
134°C SÓLIDOS ENVASADOS	S	4	20	24	28	13-17
134°C PRIÓN	B	18	43	45	53	13-17
XXX °C CUSTOM	S	Ciclo personalizable por el usuario con temperaturas 134 °C / 121 °C, tiempos de proceso a partir de 4' (134 °C) o 20' (121 °C) y secado programable.				
TEST DE VACÍO	TEST		18	18	19	
HELIX/B&D TEST	TEST		20	24	28	
VACUUM + HELIX/B&D TEST (ejecutados en secuencia)	TEST		42	46	51	

* El secado varía en función del modelo y del volumen de la máquina
Nota: los tiempos no consideran el intervalo de precalentamiento máx. (10 min.).
Nota: el tiempo puede variar en función de la carga y de la alimentación eléctrica.
Nota: el tiempo referido a los modelos de 120 V puede sufrir incrementos de hasta un máximo del 20%



BU Medical Equipment
Sede Legale ed Amministrativa / Headquarters
CEFLA s.c.
Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola (BO) - Italy
t. +39 0542 653111
f. +39 0542 653344
sternweber@sternweber.com
sternweber.com

Stabilimento / Plant
Via Bicocca, 14/C
40026 Imola (BO) - Italy
t. +39 0542 653441
f. +39 0542 653601



SW-17 SW-22 SW-28

POTENCIA ACCESIBLE



Gestión del agua

Las puertas ubicadas en la parte superior del autoclave permiten acceder a los depósitos para cargar agua desmineralizada y para limpiarlos. El sensor que se encuentra dentro del depósito comprueba la calidad del agua y asegura el buen funcionamiento de la máquina a lo largo del tiempo. Las conexiones rápidas al frente permiten vaciar los depósitos y proporcionar alimentación con agua desmineralizada, como alternativa a la carga superior.



Asistencia técnica remota con Easy Check

Todos los autoclaves de la línea SW están equipados con WiFi integrado y puerto Ethernet. Conectándolos a Internet y activando el servicio Easy Check, pueden recibir asistencia remota. Se reduce drásticamente el tiempo de asistencia, con lo que el técnico puede mantener la eficiencia de las máquinas de forma constante.



USB

Los informes de los ciclos quedan automáticamente guardados en la memoria del autoclave y, sucesivamente, se pueden descargar a través del puerto USB ubicado al frente. Los archivos en formato PDF se pueden ver en cualquier dispositivo.



Software DataSter para descargar datos automáticamente

DataSter viene incluido de fábrica con la máquina y permite descargar automáticamente los informes de los ciclos directamente a una carpeta en red o del PC. Al finalizar el ciclo, el autoclave envía un archivo en formato PDF a la carpeta seleccionada.



Impresora

Para completar la línea SW, se encuentra disponible como accesorio opcional una impresora externa capaz de imprimir informes o etiquetas con códigos de barras.




Software de trazabilidad

MyTrace es el software de trazabilidad para SW. Gracias a este programa se puede asociar el set de instrumentos esterilizados con el paciente con un código de barras. Una herramienta irremplazable para completar el proceso de esterilización y asegurar protección legal al odontólogo.



Display LCD

El display LCD con botonera está dotado de iconos gráficos claros e intuitivos. El trabajo del operador resulta simple e inmediato, dado que todos los datos a disposición aparecen en el display. Fácil de instalar con un sencillo procedimiento guiado que ayuda a realizar la primera configuración.

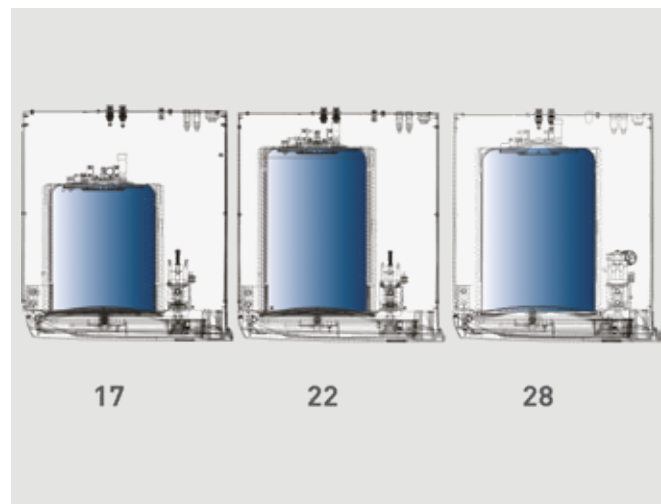

Tres capacidades, un solo tamaño

La línea SW está disponible con 17, 22 y 28 litros de capacidad. Tres capacidades diferentes para que el usuario pueda escoger la máquina que más se adapta a sus necesidades. Las medidas externas, que son idénticas en las tres máquinas, ofrecen facilidad de instalación. Los modelos de 17 y 22 litros cuentan con cinco bandejas, mientras que la versión de 28 litros tiene seis.



Código de identificación del operador

Permite acceder al autoclave al personal autorizado. Al ingresar un código de identificación (PIN), se mantendrá un registro cronológico del uso de la máquina que asegura el control de los procesos.



Arranque diferido

La opción de arranque diferido permite aplazar el inicio de los ciclos de esterilización para racionalizar el uso de la máquina.



Aviso de pruebas

Al programar esta función desde el display, SW indicará al operador cuando es necesario efectuar las pruebas Vacuum, Helix o Bowie & Dick. Por consiguiente, ya no será posible olvidar estas importantes operaciones.